

Guida rapida Ambu® Manikin Management Module


Installazione aggiornamenti del software




Ambu si impegna a ottimizzare l'attrezzatura per il training sulla base del feedback dei clienti. I prodotti e i dispositivi di training vengono continuamente aggiornati per offrire la migliore esperienza possibile. In questa guida rapida verrà spiegato come aggiornare il software Ambu® Manikin Management Module integrato nei manichini.

Nota: si consiglia di salvare il database del manichino prima di procedere con l'installazione dell'aggiornamento del software. (vedi pagina 2: NOTA)

1. Aprire il menù di configurazione

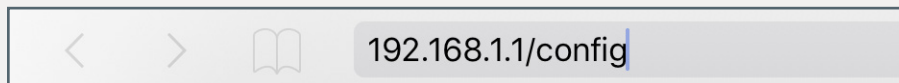


Accendere il manichino e connetterlo al computer. Aprire il browser web e inserire nella barra di ricerca **http://Ambu.login/config** oppure **192.168.1.1/config** per connettersi al menù di configurazione del manichino.

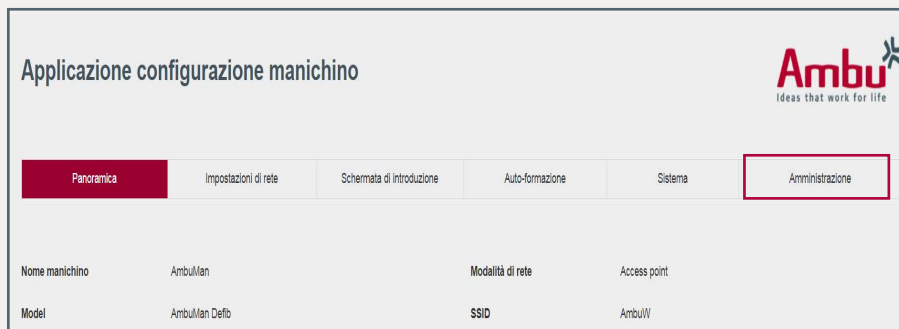


Cliccare "Amministrazione" nel menù di configurazione.


2. Caricamento dell'aggiornamento software

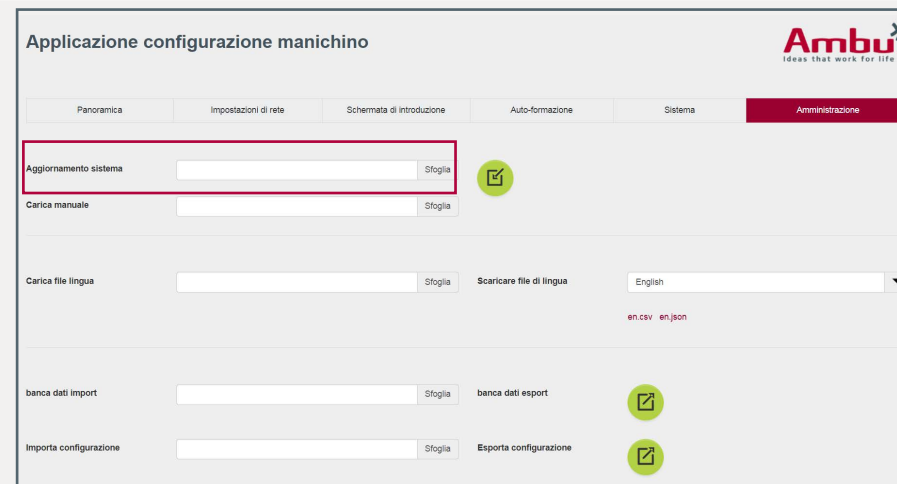

Per caricare un nuovo aggiornamento software nel manichino, aprire il file di aggiornamento in "Aggiornamento sistema". Cliccando su "Sfoglia" nella scheda "Aggiornamento del sistema" è possibile cercare il file desiderato.

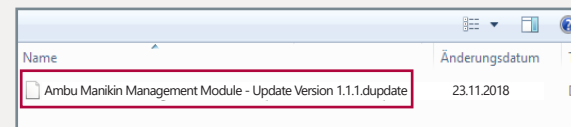

Selezionare l'aggiornamento software e aprirlo (in questo caso: Ambu Manikin Management Module - Aggiornamento versione 1.1.1.dupdate). Suggerimento: salvare il file di aggiornamento in una posizione facilmente accessibile.

Per completare l'aggiornamento, cliccare sul pulsante  e aspettare questo messaggio: **Upload riuscito. Il sistema si spegnerà per aggiornare il software del manichino.** A questo punto il manichino si spegne e si riavvia automaticamente per applicare tutti gli aggiornamenti.



3. Selezionare lingua e paese

COUNTRY_SELECT.SELECT_COUNTRY

Lingua Italiano

COUNTRY_SELECT.COUNTRY.COUNTF IT


Buttons: Save (floppy disk icon), Refresh (circular arrow icon)

Selezionare adesso la lingua e il paese dall'elenco e fare clic sul pulsante "Salva" . Per rendere effettive le modifiche, cliccare sul pulsante "Riavvia" 

Nota: La selezione della lingua e del paese una volta impostata verrà salvata. Potrà essere modificata in un successivo aggiornamento oppure al ripristino dei valori predefiniti di fabbrica. Altrimenti puoi anche modificare queste impostazioni nella configurazione (192.168.1.1/config) in "Sistema".

4. Caricamento dell'aggiornamento del kernel

Con questo aggiornamento alla versione 1.1.1 è necessario caricare anche un secondo file di aggiornamento nel manichino. Ripetere quindi i passaggi nelle sezioni 1 e 2 e selezionare questa volta il file di aggiornamento del kernel (in questo caso: Ambu_Linux_4.14.15.dupdate).

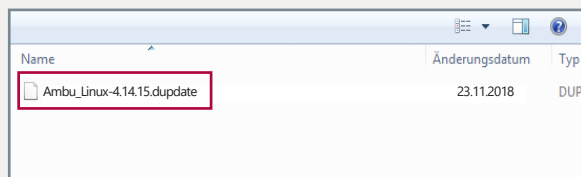

Nota: Prestare attenzione all'ordine degli aggiornamenti. È necessario installare prima l'aggiornamento del software, poi l'aggiornamento del kernel.

5. Revisione delle impostazioni

Panoramica				Impostazioni di rete	Schermata di introduzione	Auto-formazione	Linguaggio	Sistema	Amministrazione
Nome manichino	Ambu/ten	Modalità di rete	Access point						
Model	Ambu/ten Defio	SSID	AmbuW						
Modalità manichino	Host	Canale	1						
Versione software	1.1.1	DHCP/DNS	Server						
OS version	Jun 29 2018	Netmask	255.255.255.0						
Indirizzo IP	192.168.1.1	Crittografia	None						
Indirizzo MAC	F4:8C:50:8B:E7:14								


Dopo aver riavviato il dispositivo di training, riconnettersi con il manichino come descritto nella sezione 1.

E' possibile consultare la versione attuale del software nella sezione "Panoramica".


In questo caso, la versione del software è 1.1.1 e la versione del sistema operativo (OS) è del 29 giugno 2018.

NOTA

banca dati import Sfoglia banca dati esport 

Importa configurazione Sfoglia Esporta configurazione 

Prima di iniziare l'aggiornamento del software, salvare il database su un'unità locale. Ciò garantisce che i dati personalizzati saranno disponibili anche dopo l'aggiornamento del software e potranno essere reinstallati.

Apri la scheda "Amministrazione" nel menu di configurazione. Clicca sul Pulsante "Esporta database"  per esportare l'intero database.