

SCHEMA TECNICA

aScope™ 4 Cysto è una soluzione di endoscopia flessibile monouso che consente il controllo del planning personale e una maggiore produttività senza compromettere la qualità del lavoro.

È sempre disponibile e portatile, il che facilita la gestione degli impegni giornalieri e delle procedure di consulenza interne.

aScope™ 4 Cysto fornisce immagini chiare e nitide, che facilitano l'identificazione delle strutture anatomiche. Gli elevati angoli di curvatura di 210°/120° consentono di manovrare e navigare agevolmente nell'uretra e nella vescica.

Offre una qualità costante senza alcun deterioramento dell'immagine o della qualità della curvatura, perché si ha a disposizione un cistoscopia nuovo di zecca per ogni procedura.

aScope™ 4 Cysto è sterile ed elimina la necessità di riprocessamento, le costose riparazioni e il rischio di contaminazione crociata.

Di conseguenza, semplifica il flusso di lavoro, libera risorse ed è sempre pronto quando se ne ha bisogno.

aScope™ 4 Cysto offre un modo per prendere il controllo della pianificazione ed aumentare la produttività, senza compromettere la qualità del lavoro. Dall'ambulatorio alle procedure di consultazione in regime di ricovero, è possibile portare con sé sotto il braccio il leggero cistoscopia monouso e il monitor portatile. Quando la procedura è finita basta smaltirlo, senza dovervi occupare dei problemi correlati alla pulizia.

In combinazione con il monitor portatile aView2 Advance da 12,8 pollici Full-HD, questa piattaforma di cistoscopia flessibile monouso offre una soluzione efficace per tutte le procedure

Ambu® aScope™ 4 Cysto

Monouso, nuove possibilità



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sempre pronto all'uso

Sempre nuovo di zecca

Soluzione portatile senza problemi

Immagini e manovrabilità eccellenti

Sterilità garantita, senza rischio di contaminazione crociata

Libera risorse eliminando il riprocessamento e le riparazioni costose

CND:Z12020701
RDM: 2418364

Ambu

SPECIFICHE

Sistema ottico

Campo visivo	120°
Profondità di campo	3 - 100 mm
Metodo di illuminazione	LED

Parte d'inserzione

Angolo di curvatura*	210° verso l'alto, 120° verso il basso
Diametro della sonda d'inserimento	16.2 Fr / 5.4 mm (0.21")
Diametro dell'estremità distale	16.2 Fr / 5.4 mm (0.21")
Diametro massimo della parte d'inserzione	18 Fr / 6.0 mm (0.24")
Lunghezza utile	390 mm (15.4")

Canale di lavoro

Larghezza minima del canale per lo strumento**	6.6 Fr / 2.2 mm (0.086")
--	--------------------------

Stoccaggio

Temperatura***	10 - 25 °C (50 to 77 °F)
Umidità relativa	10 - 85 %
Pressione atmosferica	50 - 106 kPa

Trasporto

Temperatura	-10 - 55 °C (14 to 131 °F)
Umidità relativa	10 - 95 %
Pressione atmosferica	50 - 106 kPa

Ambiente di funzionamento

Temperatura	10 - 40 °C (50 to 104 °F)
Umidità relativa	30 - 85 %
Pressione atmosferica	80 - 106 kPa
Altitudine	≤ 2000 m

Sterilizzazione

Metodo di sterilizzazione	ETO
---------------------------	-----

Materiali

Ftalati DEHP	Non contiene ftalati DEHP
No sostanze allergeniche	Non realizzato con lattice di gomma naturale

Dimensioni

Peso	158 g
------	-------

SPECIFICHE PER L'ORDINE

Prodotto	Codice articolo	Quantità
Ambu® aScope™ 4 Cysto, Deflessione Inversa	600001000	5 pz
Accessories		
Rubinetto a 4-vie. 50 psi (3.5 bar). Dado girevole, Foro ampio****	K12-11412	50 pz
Valvola emostatica. AccessPLUS™, Foro Ampio****	K12-11413	25 pz

* Tenga presente che l'angolo di piegatura può essere influenzato se la sonda di inserimento non viene mantenuta dritta o se sono stati inseriti accessori endoscopici.

**** Non vi è alcuna garanzia che gli accessori endoscopici selezionati esclusivamente in base a questa larghezza minima del canale di lavoro siano compatibili se utilizzati in combinazione.

**** Lo stoccaggio a temperature più elevate può influire sulla durata di conservazione.


**** Non disponibile in tutti i Paesi.



aScope™ 4 Cysto è sempre disponibile e portatile.



Angoli di curvatura elevati di 210°/120°

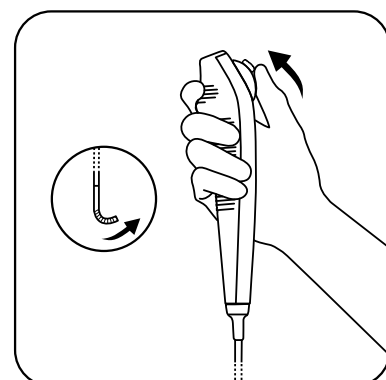

Deflessione inversa
Leva Su = Punta Giù
Leva Giù = Punta su

Ambu

■ Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 7225 2000
Fax +45 7225 2053
www.ambu.com

Ambu S.r.l.

Via Paracelso 20
20864
Agrate Brianza (MB)
Tel. +39 039 6578100
Fax +39 039 6898177
www.ambu.it

CE
2797

US: Rx Only