

# Ambu® Man Airway Wireless

# Ambu® Man Airway Instrument



Braccia e gambe opzionali disponibili

## Caratteristiche principali

- La tecnologia Wireless Ambu più recente
- Robusto e resistente
- Training di gestione vie aeree: maschere laringee, tubi laringei o tracheali, Combitube, tubi ET
- Ventilazione con pallone rianimatore o posizionamento tubi Guedel
- Rigidità toracica regolabile
- Vie aeree aperte solo con iperestensione corretta
- Borsa per trasporto con materassino e bretelle inclusi
- CND: Vo6
- RDM(Instrument): 1684167 | RMD(wireless): 1684182
- Materiale privo di lattice di gomma naturale

### AmbuMan Airway Wireless

- La tecnologia Wireless Ambu più recente
- Ambu Manikin Management Module basato su browser per controllo, documentazione e monitoraggio



## Ambu® Man Airway

Con Ambu Man Airway si possono praticare tutti i comuni metodi di gestione delle vie aeree. Tuttavia, questo manichino non dispone del sistema igienico Ambu per la ventilazione bocca a bocca e bocca-naso.

Il kit corpo intero, acquistabile separatamente, permette al manichino di essere collocato in posizione seduta.

La borsa per il trasporto, se completamente aperta, può essere utilizzata come materassino per addestramento.

### Display di monitoraggio

L'indicatore mostra all'addestratore il volume dell'aria erogata (in L) e la profondità di compressione del torace (in mm).

Inoltre, permette di visualizzare quando la compressione viene effettuata con le mani in posizione errata e quando si presenta un'insufflazione gastrica attraverso un simbolo di avvertimento.

### Ambu Manikin Management Module

Ambu Man utilizza l'ultima tecnologia Wireless Ambu: Ambu Manikin Management Module, basato su browser, che permette il controllo, la documentazione e il monitoraggio wireless della performance dei discenti.

L'Ambu Manikin Management Module è l'interfaccia centrale, dove si trovano tutti i dati e le informazioni: profondità di compressione, posizione corretta delle mani, volume di ventilazione e insufflazione dello stomaco.

### Gestione delle vie aeree

Training di gestione delle vie aeree: come maschere laringee, tubi laringei e tracheali. Permette la ventilazione con pallone rianimatore e l'uso di tubi Guedel. Le vie aeree si aprono solo con un'iperestensione corretta.

## Specifiche

AmbuMan Airway Wirelss	Connettività	✓	WLAN o LAN Tecnologia Wireless Ambu costruita sull'ultima generazione dei moduli Intel WLAN
	Ambu Manikin Management Module	✓	Sistema operativo indipendente e controllo basato su browser, scenari programmabili, documentazione individuale per un massimo di 4 partecipanti, visualizzazione e controllo paralleli di un massimo di 6 manichini, accesso multiplo parallelo a diversi dispositivi per visualizzare la performance
	Alimentazione	✓	Adattatore AC, Batterie o PoE (opzionale, non incluso nella confezione)
Gestione vie aeree	✓	Traning di gestione vie aeree: come maschere laringee, tubi laringei e tracheali. Permette la ventilazione con pallone rianimatore e l'uso di tubi Guedel. Le vie aeree si aprono solo con un'iperestensione corretta.	
Display di monitoraggio	✓	Estensibile Volume di ventilazione, profondità di compressione, posizione delle mani, insufflazione dello stomaco	

## Dati tecnici

Peso del torso con borsa per trasporto	13 kg
Lunghezza del torso	80 cm
Lunghezza del corpo intero	165

## Specifiche per l'ordinazione

Ref.	Descrizione
A 284 427 000	<b>AmbuMan Airway Wireless,</b> Torso, Tecnologia Wireless Ambu integrata, Ambu Manikin Management Module, Borsa per trasporto / materassino
A 284 424 000	<b>AmbuMan Airway Instrument,</b> Torso, Borsa per trasporto / materassino

### Accessori


234 000 077	Batterie
234 000 706	Kit corpo intero (braccia, gambe, pantaloni e borsa)
266 000 517	Pezzo facciale Ambu (1 pezzo)
234 000 794	Borsa per trasporto / materassino



Ambu Man Airway Wireless Torso



Display di monitoraggio

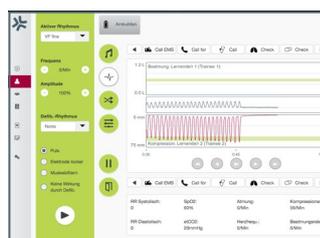

Ambu Manikin Management Module



Borsa per il trasporto (materassino incluso)

### Ambu S.r.l.

Via Paracelso 20  
Centro Direzionale Colleoni  
Palazzo Andromeda 3  
20864 Agrate Brianza MB - IT  
Tel.: +39 039 6578100  
Fax.: +39 039 6898177  
www.ambu.it

### Ambu A/S

Baltorpbakken 13  
DK - 2750 Ballerup  
Denmark  
Tel. +45 7225 2000  
Fax +45 7225 2053  
www.ambu.com